



Giovanni Gin1 Ashe Super bubble beauty combo är en multifunktionell apparat som kombinerar sex hudvårdstekniker för att ge effektiva resultat vid skönhetsbehandlings.

Tekniska data:

Kraft	60W
Spänning	220-240V 50/60Hz
Tryck	≤ 400 Kpa
Vakuum	≤ 24 L

Enhetens funktioner:

Vätgasrengöring - i denna behandling används väte för att rengöra på djupet, neutralisera fria radikaler och exfoliera död hud. Den stimulerar cellförnyelsen, förbättrar hudens struktur, syresätter och ger näring åt huden. Resultatet blir en slät, djupt återfuktad och strålande hud och en långsammare åldrandeprocess.

Microcurrents (biolifting) - Denna icke-invasiva behandling använder mikroströmmar för att stimulera muskel- och cellförnyelse, påskynda avlägsnandet av toxiner och överskottsvatten samt stimulera kollagen- och elastinproduktionen. Den toppmoderna behandlingen är smärtfri och förbättrar synbart hudens elasticitet och fasthet samt minskar fina linjer och rynkor. Användningen av en lämplig gel säkerställer en effektiv verkan av mikroströmmarna.

Ultraljud - Akustiska vågor med frekvenser som är högre än det mänskliga örats hörselgränshörskel underlättar penetrationen av aktiva substanser från kosmetika i huden. De har en stimulerande effekt på cellerna och ökar produktionen av kollagen och elastin. På detta sätt främjar de djup regenerering av huden, förbättrar dess naturliga förnyelseprocesser och allmänna tillstånd.

Skin scrubber - Cavitation peeling-behandlingen består av att rengöra huden genom ultraljudsvågor som framkallar fenomenet kavitation. Detta gör att huden vårdas och regenereras på djupet och ger den ett fräscht utseende. Regelbunden användning av skin scrubber kan förbättra hudens struktur och bidra till att minska ojämnheter.

Kylhuvud - Gör att du kan kyla huden, minska svullnad, lindra angiom och erytem samt slappna av i musklerna. Det har en lugnande effekt på huden och hjälper till att lindra hudproblem och muskelspänningar, och resultatet är en uppfiskad, återfuktad och avslappnad hud.

Spray - Gör det möjligt att försiktigt spraya en dimma av toners, essenser och andra produkter som är rika på aktiva ingredienser på hudens yta. Dess exakta verkan säkerställer en effektiv och jämn fördelning av formuleringarna, vilket resulterar i en effektivt återfuktad och uppfiskad hud. Detta gör hudvården mer effektiv och njutbar och ger huden ett friskt och strålande utseende.

Försiktighetsåtgärder:

1. Använd inte en enhet som är ansluten till flera nätaggregat.
2. Stäng av strömbrytaren när du byter säkring för att undvika brand eller elektriska stötar.
3. Använd en strömförsörjning på 220 V ± 22 V, 50 HZ ± 1 HZ och ett jordat uttag.
4. Användning av en defekt kabel innebär risk för brand eller elektriska stötar.
5. Vrid eller knäck inte nätsladden för att undvika brand eller elektriska stötar.
6. Om enheten är skadad, kontakta servicecentret.
7. Använd inte utrustningen på instabilt underlag.
8. Det får inte finnas vatten eller skräp i enheten.
9. Dra ut nätkontakten när du flyttar enheten.
10. Flytta inte på apparaten när den är påslagen.
11. Enheten ska placeras på en stabil yta och lämna minst 5 cm fritt utrymme för att säkerställa luftcirkulationen.
12. Enheten får inte täckas över med något för att förhindra att ventilationsöppningarna blockeras.

13. Undvik att använda utrustningen under följande förhållanden: solljus, hög luftfuktighet, nära vatten, vibrationer, sluttande yta; miljö med starka magnetfält.
14. Enheten får inte placeras i närheten av radioapparater, TV-apparater, kopiatorer, faxar etc.
15. Får inte användas tillsammans med annan utrustning (t.ex. mikrovågor) för att undvika ömsesidig störning som kan orsaka funktionsfel.
16. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.
17. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
18. Apparatsens arbetsparametrar, tid och intensitet ska väljas individuellt beroende på kundens behov och hud.

Lysting!

Efter behandlingen ska alla handstycken rengöras noggrant och desinficeras i enlighet med gällande säkerhetsstandarder. Blötlägg inte de huvuden som är direkt anslutna till apparaten. Detta kan skada apparaten. Rena huvuden ska placeras på det stativ som är fäst vid enheten.

Apparaten ska rengöras med en trasa, starka kemiska preparat får inte användas. Om apparaten inte används under en längre tid bör den rengöras väl och eventuellt kvarvarande vatten hållas ut.

Kontraindikationer för behandling:

1. Känslig hud, mycket svår akne.
2. Pacemaker hjärta, implanterbar Defibrillator hjärta eller annan implanterbar elektromagnetisk anordning.
3. Svår diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol.
4. Bakterie-, virus- och svampsjukdomar i huden.
5. Nevi, hemangiom, ärrbildning och färska sår på huden.

Indikationer:

1. Hudproblem som akne, pormaskar, vaskulär hud eller ökad talgproduktion.
2. Djuprengöring av huden.
3. Utjämnning av ärr och acnemärken.
4. Utjämnar rynkor.
5. Torr hud i behov av återfuktning.

Förvaring: Enheten ska **förvaras** i ett välventilerat, rent rum vid en omgivningstemperatur på 5°C till 40°C och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 80%.

Enhetens mått:



Konstruktion av enheten



Begagnad vattentank



Anslutningshuvuden

Externt filter för mikrodermabrasion

På/av-omkopplare

Knopp för vätgasrening

Val av vattenstråle eller sprayfunktion



Huvud



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ultraljudshuvud
2. Kylhuvud
3. Kavitationsskalningshuvud (hudskrubbare)
4. Spruthuvud
5. Vätgasreningshuvud
6. Microcurrent applikationshuvud

W uppsättningen inkluderar: 6 huvuden för att utföra behandlingen, Rengöringstips vätgas, 3 vätskeflaskor och en spillvattentank, strömkabel och huvudhållare.


Instruktioner för användning:

1. Tvätta och rengör huden noggrant före behandlingen och ta bort eventuella sminkrester.
2. Fyll ABC-flaskorna med aktiva ingredienser med en lösning som är anpassad till typen av behandling och hudens behov.
3. Anslut huvudena till enheten.
4. Anslut apparaten till strömförsörjningen och tryck sedan på strömbrytaren på apparatens baksida.
5. Kontrollpanelen med pekskärm kommer att aktiveras.

6. Klicka på ikonen för lämpligt huvud och justera sedan behandlingstid, intensitet och behandlingsvågläge.
7. När alla parametrar har justerats trycker du på "Start" för att påbörja behandlingen.

Stöd för huvudet:

Rening av väte

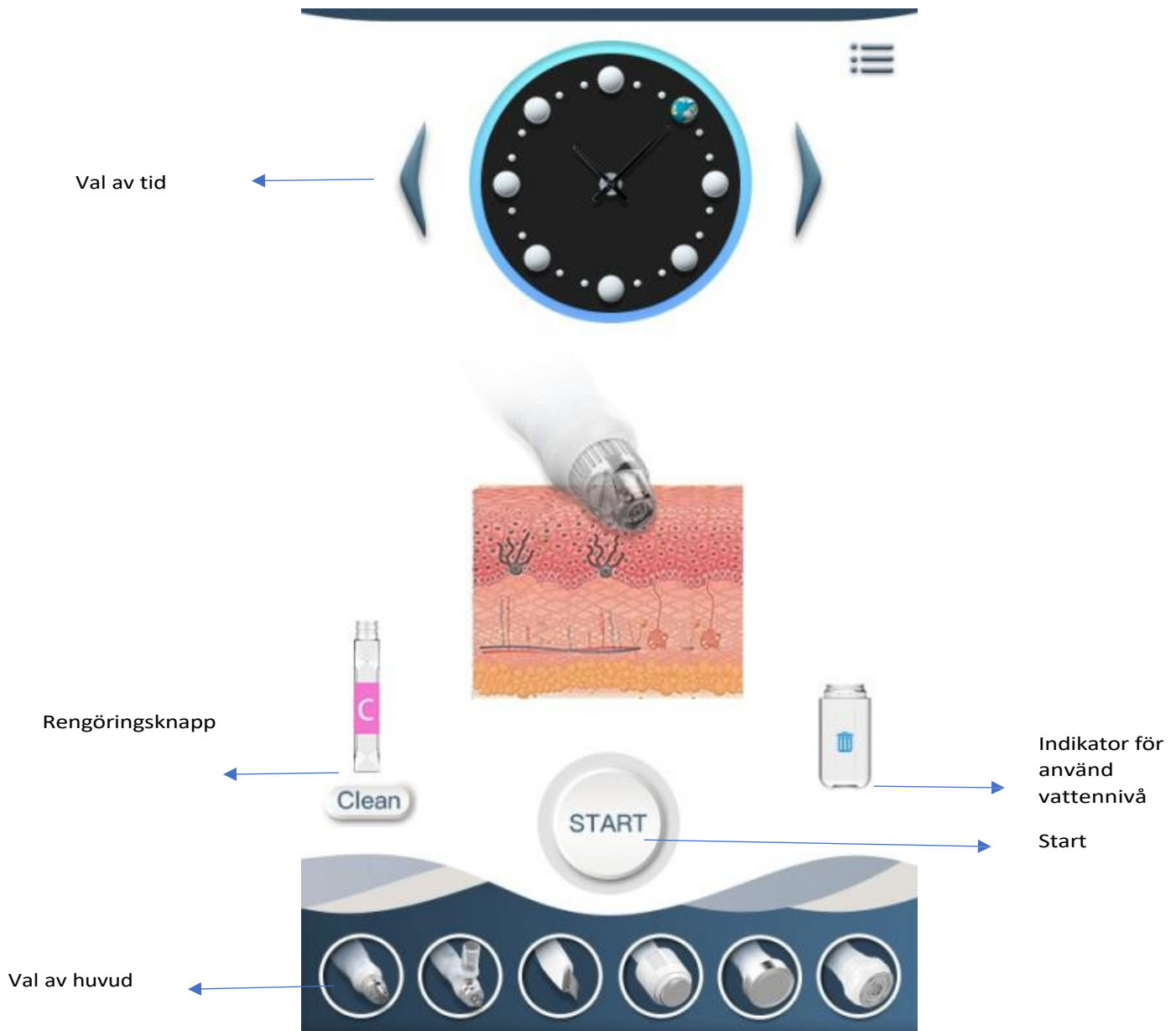

1. Använd ratten för att välja lämplig ABC-cylinder.
2. Använd justeringsratten för vattenflöde och vakuum för att ställa in önskat vattenflöde och vakuumnivå.
3. Klicka på ikonen för vätgasreningshuvudet och ställ in behandlingstiden.
4. Vrid den vita ratten på enhetens ovansida till vätgasreningsfunktionen.
5. Tryck på start för att påbörja behandlingen.
6. Under behandlingen ska du kontrollera mängden vatten i flaskorna och i behållaren för använt vatten.

7. När du är klar vrider du cylindervredet till läge C för att rengöra röret. Ställ in vattenstrålen och vakuomet på max. Placera locket över huvudet och starta enheten för att automatiskt rengöra slangen.
8. Flaskorna och vattentanken ska tömmas och rengöras efter varje behandling.

OBS!

Innan du använder enheten för första gången ska du ansluta den enligt anvisningarna ovan och sedan fylla på med en lämplig flaska vatten eller vårdprodukt. Placera vätgasreningsmunstycket på vätgasreningshuvudet. Sätt vattenförbrukningen till max och sugkraften till medium och slå på enheten - välj ikonen för vätgasreningshuvudet och slå på enheten. Tid 7-10 min.


Spruthuvud

1. Fyll behållaren på spruthuvudet med lämplig vätska (tonic, essens eller beredning med aktiva substanser).
2. Vrid den vita ratten till markeringen för spruthuvudet.
3. Välj ikonen Spray head på skärmen och ställ in körtiden och tryck sedan på start.
4. Flytta huvudet till behandlingsområdet (t.ex. ansikte, panna) och börja spraya.
5. Reservoaren ska tömmas och rengöras efter varje behandling.

Kylhuvud


1. Klicka på ikonen för kylhuvudet
2. Välj lämplig behandlingstid och tryck på Start.
3. Innan behandlingen påbörjas kan en ampull eller ett hydrolat appliceras på huden för att hjälpa till att föra huvudet över huden.

Mikroströmshuvud (biolifting)

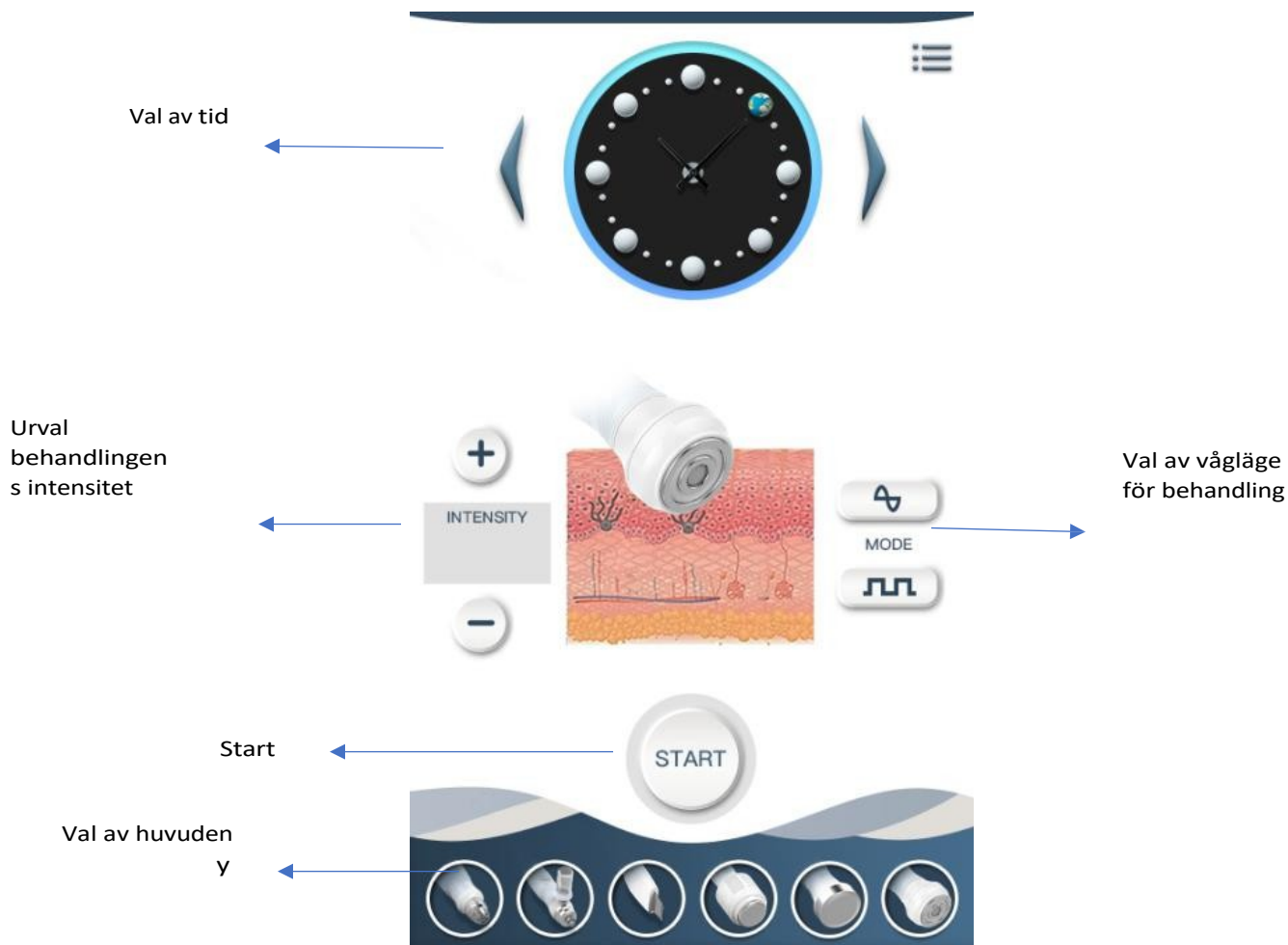

1. Innan behandlingen påbörjas, applicera en gel på huden för att hjälpa till att styra huvudet.
2. Klicka på ikonen för mikroströmhuvudet.
3. Ställ in tid och intensitet för behandlingen samt vågläge för behandlingen.
4. Placera huvudet på ditt ansikte, tryck på start och starta behandlingen.

Ultraljudshuvud

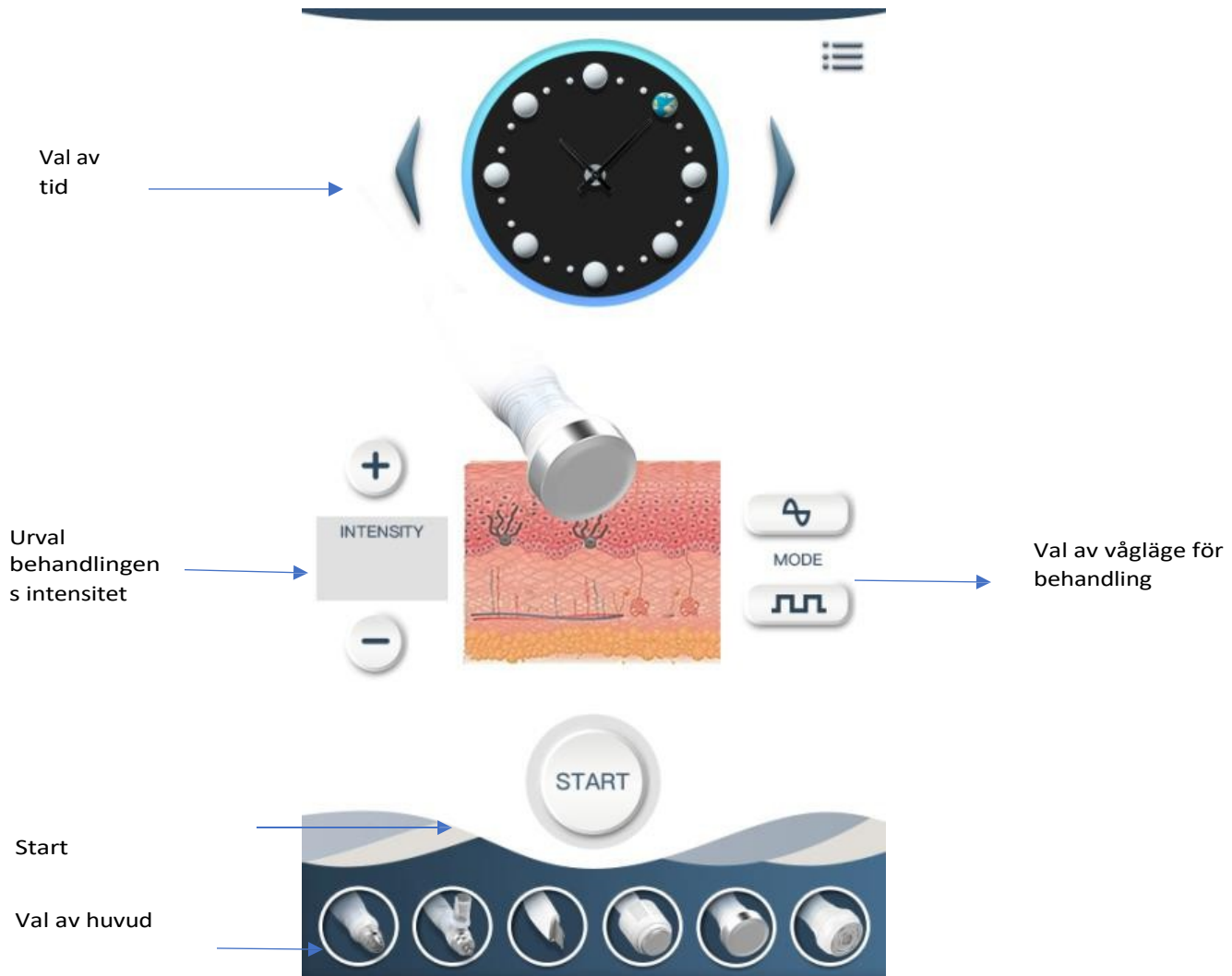

1. Applicera ultraljudsgelen på huden innan du påbörjar behandlingen.
2. Klicka på huvudikonen.
3. Välj lämpliga behandlingsparametrar: tid, intensitet och behandlingsvågläge.
4. Starta behandlingen genom att trycka på Start.

Huvud för hudskrubbing (kavitationspeeling)

1. Klicka på ikonen för hudskrubberhuvudet.
2. Välj behandlingstid, intensitet och behandlingsvågläge.
3. Starta behandlingen genom att trycka på Start.
4. Tvätta och rengör ansiktet noggrant före behandlingen. Applicera en liten mängd vatten på den rengjorda huden. Du kan fukta ansiktet lätt med en bomullspinne indränkt i ett mildt ansiktsvatten. Huden ska vara våt hela tiden under kavitationsbehandlingen.
5. Håll spateln i 45° vinkel. För spateln över ansiktet, t.ex. från höger till vänster eller från botten till toppen.
6. Behandlingstiden bör vara cirka 20 minuter.

Problem och hur man löser dem

Kontakta service när apparaten inte fungerar som den ska. Kontrollera apparaten med hjälp av följande tips och se om du kan åtgärda problemet själv innan du vänder dig till service.

Problem	Orsak	Lösningsmetoder
Efter uppstart fungerar inte enheten.	Strömbrytaren 0/1 är avstängd. Avbrott i säkringsförsörjningen. Strömbrytaren är skadad.	Kontrollera att stickkontakten är ansluten. Slå på 0/1. Byt ut säkringen.
Huvudet fungerar inte som det ska.	Det går inte att trycka på startknappen. Felaktig installation av huvudet. Felaktig installation av kabeln med enheten.	Försök att trycka på startknappen igen. Kontrollera att huvudets installation är korrekt. Byt ut huvudet eller silikonpackningen. Sätt tillbaka huvudet.
Läckage av vätska	Silikontätningen är skadad eller saknas. Felaktig montering av enheten.	Kapsla flaskorna korrekt eller byt ut förseglingen. Lämna in enheten till serviceverkstaden för reparation.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Ta inte isär enheten eller försök att använda den för andra ändamål än som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - för att säkerställa att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som ACTIVESHOP Ltd. tillhandahåller i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess bostäder skadades.
5. Lägg inte föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppningar. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. W Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med bränns upp.

NOT

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära en hälsorisk eller leda till döden, så använd och förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in uttjänta elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk utrustning måste förbrukad elektrisk utrustning

samlas in separat och lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara ska lämnas in för återvinning när de är uttjänta. De ska därför lämnas till lämpliga samlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.